


## Portfólio extenso para atender necessidades específicas

- Diversos comprimentos para 14.5 Fr.
- Apresentações Reta ou Curva - Alphacurve®
- Colocação com kits de microintrodutores

EQUISTREAM® Alphacurve®  
Cateter pré-curvado com 16mm  
Ajuste da ponta maior que 180°  
Configuração da curva em "U".<sup>2</sup>

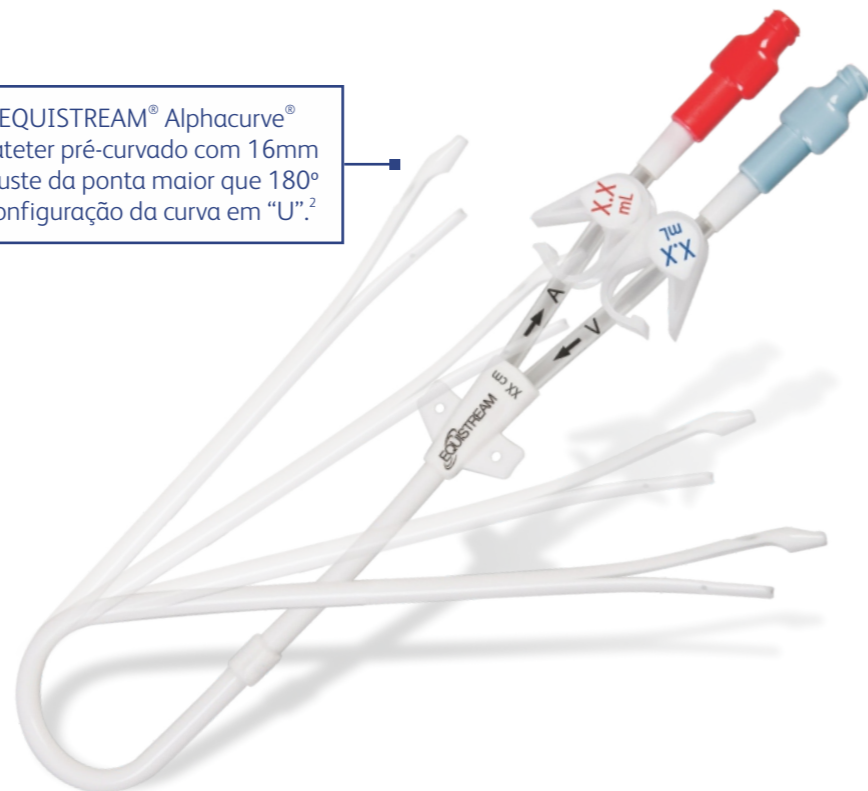

### CONTEÚDO DO KIT - 14,5 FR

- 02 Curativos/coberturas adesivas
- 01 Introdutor Valvulado AirGuard® – 15 Fr
- 01 Dilatador de 8 Fr
- 01 Cateter duplo-lúmen de 14,5 Fr
- 01 Dilatador Dualator® de 10-12 Fr
- 01 Tampa oclusora
- 01 Fio-guia de 70 cm x 0,038 in.
- 01 Agulha de 18 G.
- 01 Tunelizador

### CATETER EQUISTREAM® 14,5 FR

	RETO		
	Código	Estilete	Descrição
<input type="checkbox"/>	6903150	Com estilete	14,5 Fr x 15 cm
<input type="checkbox"/>	6903190	Com estilete	14,5 Fr x 19 cm
<input type="checkbox"/>	6903230	Com estilete	14,5 Fr x 23 cm
<input type="checkbox"/>	6903270	Com estilete	14,5 Fr x 27 cm
<input type="checkbox"/>	6903310	Com estilete	14,5 Fr x 31 cm
<input type="checkbox"/>	6903350	Com estilete	14,5 Fr x 35 cm
<input type="checkbox"/>	6903420	Com estilete	14,5 Fr x 42 cm

	CURVO ALPHACURVE*		
	Código	Estilete	Descrição
<input type="checkbox"/>	6905190	Sem estilete	14,5 Fr x 19 cm
<input type="checkbox"/>	6905240	Sem estilete	14,5 Fr x 24 cm
<input type="checkbox"/>	6905280	Sem estilete	14,5 Fr x 28 cm
<input type="checkbox"/>	6905310	Sem estilete	14,5 Fr x 31 cm

RMS: 80689090050

\* Permitem taxas de fluxo tão elevadas como 500ml/min.

1. NKF K-DOQI Guideline 12 <[http://www.kidney.org/Professionals/Kdoqi/guidelines\\_updates/doqipva\\_ii.html#doqipva12](http://www.kidney.org/Professionals/Kdoqi/guidelines_updates/doqipva_ii.html#doqipva12)>.
2. Data on file, Bard Access Systems, Inc. Bench test results may not necessarily be indicative of clinical performance.


Consulte os rótulos e instrução de uso do produto para qualquer indicação, contraindicação, riscos, advertências, cuidados e instruções de uso.

## Alta Performance na hemodiálise



## Tecnologia da ponta “Split” Otimiza o fluxo

- Permite o posicionamento adequado das duas pontas em átrio direito, oferecendo alto fluxo.
- Orifícios em 360°, nas duas pontas, reduzindo o risco de oclusão.

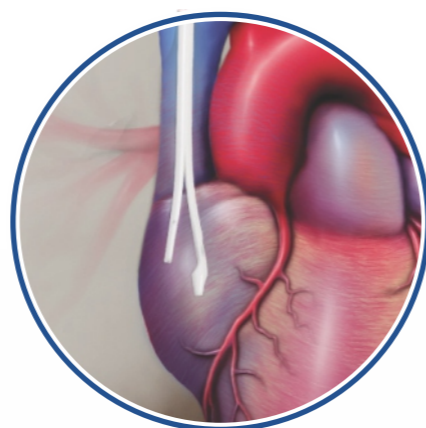

## Inserção por fio-guia

- Ajuda a passar o fio-guia com o estilete oco pré-preenchido.
- Menor chance de dobra da ponta devido ao design aninhado do cateter.
- Reduz o risco de embolismo aéreo com o introdutor valvulado AirGuard®.

Estilete oco pré-preenchido

Ponta cônica para inserção

## Cateteres EQUISTREAM® para uma **performance** em diálise eficiente

- Recirculação <2%, em média na infusão e aspiração, quando testado in-vitro.<sup>2</sup>
- O posicionamento no átrio direito permite um ótimo fluxo com base nos guidelines da KDOQI.<sup>1</sup>

Conexões Luer-Lock

Asas de sutura fixas

SureCuff\* Cuff de tecido

Disponível em 14,5 Fr

Estilete oco pré-preenchido (cateteres retos)

Ponta cônica desenhada para fácil inserção

